

SMILY

Scaler dentale sonico elettrico portatile



MANUALE D'USO

Carissimo cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

D'ora in poi, potrai mantenere sani denti e gengive. Rimuovere efficacemente la placca dentale, il tartaro, le macchie e le calcificazioni più dure dai denti, prevenendo le malattie gengivali. Questo scovolino dentale multifunzionale utilizza un innovativo sistema a vibrazione per rimuovere il tartaro dai denti e massaggiare le gengive, dandole un sorriso pieno di fiducia e alito fresco ogni mattina!

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1x Scaler dentale elettrico sonico
1x Cavo di ricarica
1x Manuale d'uso



SPECIFICHE

Tensione nominale: 3,7 V
Capacità della batteria: 300 mAh
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Adattatore: 5 V / 5 mA
Corrente in standby: 20 uA
Corrente nominale: 200 mA
Rumorosità del motore: inferiore a 60 decibel
Durata in funzionamento: circa 2 ore

Livelli di intensità di lavoro: 5
Classe di impermeabilità: IPX6
Tipologia: Ricaricabile (batteria integrata)
Persone adatte all'uso: adulti
Materiale: silicone medico + plastica
Ambiente di utilizzo: temperatura normale

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto E CONSERVARLO PER UN UTILIZZO FUTURO.

- Questo scaler è progettato per l'utilizzo odontoiatrico. È progettato per la rimozione di tartaro o depositi sui denti e altri lavori dentali per i quali la vibrazione ultrasonica è benefica. Non utilizzarlo per applicazioni non previste. In caso di dubbi sulla propria applicazione, contattare il rivenditore locale o il negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
- Utilizzare solo per gli scopi previsti. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi all'utente o danni al prodotto, anche irreparabili. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni per l'uso.
- Applicare sempre la punta contro le superfici dei denti durante la pulizia. Evitare il contatto non necessario della punta con i tessuti molli, come la gengiva, la mucosa o la pelle.
- Verificare la presenza di eventuali vibrazioni anomale della punta prima dell'uso. Se vengono rilevate anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo dello scovolino e contattare il rivenditore.

- Evitare che la punta tocchi le protesi in ceramica durante la pulizia. Ciò potrebbe danneggiare la punta.
- Utilizzare solo lo scaler con l'adattatore di alimentazione originale.
- Prima di collegare l'adattatore a una presa di corrente, assicurarsi che il voltaggio indicato sull'etichetta dei dati tecnici corrisponda al voltaggio della presa di corrente.
- La testina in metallo dello scovolino per denti non è sostituibile.
- Non esporre lo scovolino all'ambiente esterno, temperature estreme, luce solare diretta, umidità eccessiva e non riporre in ambienti eccessivamente polverosi.
- Utilizzare in ambienti interni con temperature da -10°C a 40°C .
- Non lavare o immergere il prodotto in acqua per lungo tempo.
- Questo prodotto è riservato ai soli adulti. Si prega di conservare il prodotto correttamente dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare lesioni accidentali.
- Questo prodotto contiene una batteria. Non metterlo vicino al fuoco o a contenitori ad alta temperatura per evitare incendi o esplosioni.
- Non posizionare il prodotto vicino a caloriferi, fiamme o altre apparecchiature che siano fonte di calore.
- Tenere lo scovolino per denti a una distanza sufficiente dagli occhi.
- Non scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione. Ciò potrebbe danneggiare l'alimentatore o la presa di corrente. Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente tirandolo per la spina.
- Esaminare sempre i componenti dell'unità per rilevare eventuali danni prima di iniziare il trattamento. I componenti danneggiati non devono essere utilizzati e devono essere sostituiti.
- Non posizionare il cavo dell'adattatore di alimentazione su oggetti taglienti.
- Per evitare che si verifichi una situazione di pericolo, non riparare da soli lo spazzolino o i suoi accessori né modificarli in alcun modo. Per tutte le riparazioni, contattare un centro di assistenza autorizzato. Manomettendo il prodotto, si rischia di invalidare i diritti legali derivanti da prestazioni insoddisfacenti o la garanzia di qualità.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina rotti, o se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto o è comunque danneggiato.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Qualsiasi intervento di assistenza o riparazione deve essere eseguito da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.
- Il prodotto non è idoneo all'uso in presenza di gas infiammabili.
- Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto.

Attenzione: non utilizzare il prodotto mentre è in fase di ricarica.

COMPONENTI

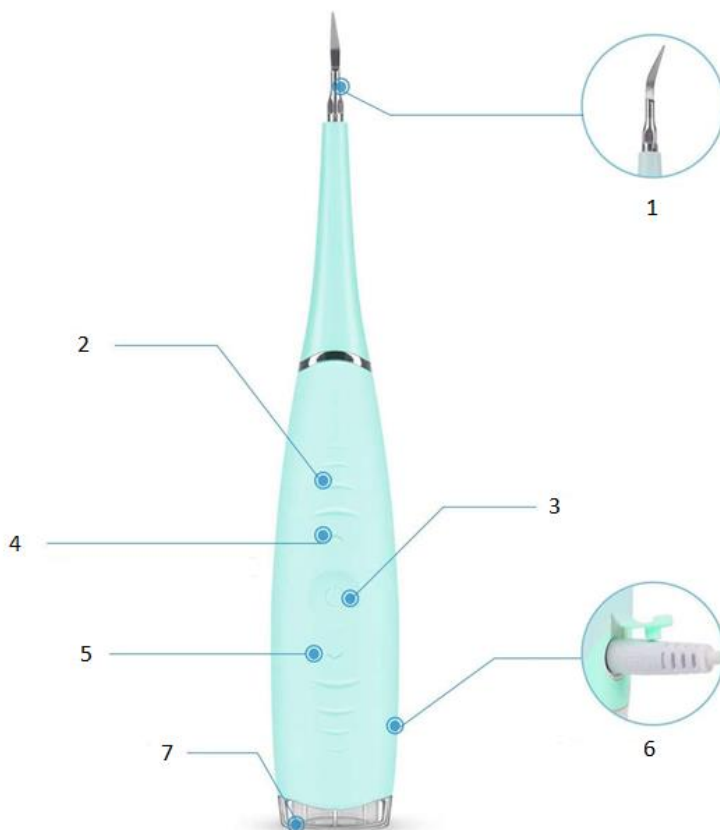

1. Testina di pulizia	5. Intensità più bassa
2. Striscia antiscivolo	6. Porta di ricarica
3. Interruttore ON / OFF	7. Indicatore di carica
4. Intensità più alta (in totale 5 livelli di intensità regolabili dall'alto verso il basso)	

RICARICA

Ricaricabile con presa USB:

Modalità di ricarica rapida e sicura tramite USB.

1. Inserire il caricabatterie nella parte terminale dello scovolino e collegarlo all'alimentazione per avviare la ricarica.
2. L'indicatore luminoso di ricarica si illuminerà di rosso, a indicare che inizia la ricarica. Quando il dispositivo è completamente carico, la luce diventerà verde.



NOTA:

- Una carica completa richiede circa 2 ore.
- Dopo essere entrato in una modalità di ricarica, lo scovolino passerà in modalità spento (la macchina non funzionerà durante la ricarica).
- Una volta che il prodotto è stato caricato, può essere utilizzato circa 200 volte.

Se sta caricandolo scovolino per la prima volta o se non lo usa da molto tempo (più di 3 mesi), una ricarica completa può richiedere più tempo.

- Scollegare lo scovolino carico dall'adattatore di alimentazione e scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di alimentazione elettrica. Dopo aver scollegato lo scovolino dall'alimentatore, l'indicatore LED di ricarica si spegnerà.

Raccomandazioni per ottenere la massima durata possibile della batteria:

- Caricare lo scovolino a temperatura ambiente.
- Non lasciare lo scovolino collegato alla fonte di alimentazione elettrica più a lungo del necessario per caricarlo.
- Idealmente, conservare lo scovolino completamente carico.
- Se lo scovolino non viene usato per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni 6 mesi.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO




Questo scaler per i denti funziona secondo il principio che converte l'energia elettrica in energia di vibrazione ultrasonica.

Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, regolare l'intensità tramite i pulsanti di regolazione superiore e inferiore e iniziare a pulire le parti che necessitano di pulizia.




La punta dello strumento deve essere applicata al dente in modo che il movimento della punta sia parallelo alla superficie del dente. I primi 2 mm della punta sono i più efficaci!

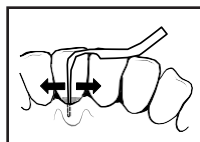

La normale pulizia richiede raramente più del 50% del livello di intensità. Tuttavia, il tartaro più difficile da rimuovere potrebbe richiedere un'impostazione di intensità maggiore.

Assicurarsi che il contatto tra la punta e la superficie del dente sia mantenuto durante la pulizia. Continuare a muovere lentamente la punta avanti e indietro e lasciare che lo strumento esegua il lavoro. Alternare colpi brevi e lunghi in modo da pulire l'intera superficie di ciascun dente. La punta è normalmente diretta verso la tasca parodontale.

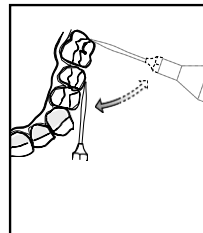

Per mantenere la punta che lavora parallelamente alla superficie di ciascun dente, è importante seguire l'anatomia del dente.



Con la corretta impostazione dell'intensità, una pressione adeguata contro il dente (circa 20 grammi ma non superiore a 50) e la punta che opera parallelamente alla superficie, il trattamento sarà delicato, silenzioso ed efficiente.



ATTENZIONE!

- Se, durante il trattamento, si sente un cigolio (forte e dominante), la pressione contro il dente potrebbe essere troppo bassa o la punta non parallela alla superficie del dente.
- Non premere troppo forte con la mano. Mantenere sempre il contatto con i denti applicando una leggera pressione.
- Prestare attenzione intorno al bordo gengivale sensibile.
- Per alcuni utenti potrebbe essere un po' difficile da usare la prima volta, ma gradualmente diventerà uno strumento indispensabile per l'igiene orale!
- La placca e le macchie si riducono in polvere. Pertanto, si prega di sciacquare la bocca dopo l'uso.
- Si prega di usarlo mantenendo un certo grado di umidità in bocca.
- Se l'umidità viene meno durante l'uso, sciacquare la bocca.
- Quando viene applicato sull'interno del dente, utilizzare uno specchietto dentale.

Dopo aver finito di pulire i denti:

- Sciacquare bene la bocca.
- Lavare la testina di metallo sotto l'acqua corrente pulita.
- Asciugare con un panno il corpo dello scovolino per denti.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.

